

# Technologie JALOR

Významná výhoda výplňového materiálu JALOR spočívá v pokročilém čistícím a homogenizačním procesu.

- Další předností je zasíťování technologií BDDE s nejpokročilejší inovací trojrozměrné matice, která umožňuje navázat více **homogenního gelu než u konkurenčních výrobků**.
- Následně, s použitím nového exklusivního stupně homogenizace a optimalizace viskoelastického gelu, dochází k jeho stabilizované tekutosti, **výsledkem je vysoce viskózní a elastický materiál**.
- To vše vytvoří velmi hustý gel, který proudí skrz jehlu o síle 27G s **neobvyčejným efektem a výjimečným trváním**.
- Díky **velmi sofistikované čistící proceduře jsou eliminovány všechny nežádoucí chemické přísady včetně kyslíku. Jen za takových podmínek dosahuje produkt plné stability v injekční stříkačce**.



**APLIKACE:** okamžitě viditelné změny, přírodní, čistá

1. Vrásky na čele	
2. Periokulární vrásky	
3. Tváře	
4. Nosoretní rýhy	
5. Vrásky nad horním rtem	
6. Vrásky pod dolním rtem	
7. Objem rtů	
8. Kontura rtů	

9. Obličejové vrásky	
10. Nosní korekce	
11. Glabella	
12. Krk	
13. Dekolt	
14. Ruce	
15. Brada	

re-style



JALOR re-style, Bio-stimulátor na nejvyšší úrovni.


Je nesporné, že vyplňování vrásek a zvyšování objemu není jediná cesta k omlazení, toto je důvodem použití přírodní nezasíťované kyseliny hyaluronové, která má důležitou úlohu v boji a prevenci proti stárnutí pleti. Výsledkem je zlepšení elasticity a pevnosti pokožky.

Speciální formulace JALOR re-style s velmi vysokou koncentrací kyseliny hyaluronové (18 mg/1 ml) společně s vysokou koncentrací glycerolu (20 mg/1 ml) a ultra vysokou molekulární hmotností (3 mil. Daltona) vydrží jeho účinek i více jak třikrát déle než konkurenční produkty. Umožňuje oživení optimálního fyziologického prostředí pro proliferaci fibroblastů, jejich stimulaci a pro neosyntézu kolagenu, elastinu a ostatních složek extracelulární matice.

**Specifikace:**

Objem.....	1 ml
Koncentrace HA.....	18 mg/1 ml
Stabilizátor Glycerol.....	20 mg/1 ml
Molekulární hmotnost.....	3 mil. Daltona
Jehly.....	2x 27G

style

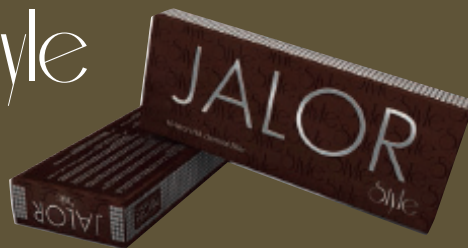

JALOR style, výplň pro každého.


Nejnovější výsledky vývoje ukazují, že v současné době patří polyvalentní výplně k těm nejčastěji používaným, nicméně technologie JALOR využívá speciálních funkcí k vytvoření **unikátního produktu**.

- Není živočišného původu: hyaluronát sodný se získává ze syntézy biologických procesů fermentace.
- Dvojitý účinek vysoce koncentrované zasíťované kyseliny hyaluronové s 23 mg/1 ml a biostimulací volné kyseliny hyaluronové.
- Ultra vysoká molekulární hmotnost produktu (3mil. Daltona) je charakteristickou vlastností pro vynikající zasíťování, toto propojení nám umožňuje snížit degradaci kyseliny hyaluronové a tím maximalizuje dobu trvání ve tkáni.
- Spolupráce s butandiolem diglycidyletherem (BDDE), všeobecně známým činidlem síťování s minimální toxicitou, výrazně snižuje vznik alergií.

**Specifikace:**

Objem.....	1 ml
Koncentrace HA.....	23 mg/1 ml
Zasíťování.....	BDDE
Dynamická viskozita.....	500.000 Pa s
Stupeň zasíťování.....	★★★
Jehly.....	2x 27G

intense

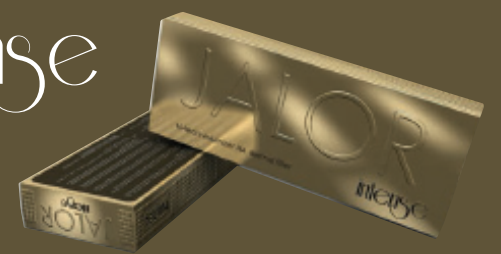

JALOR intense, pro zvýšení objemu.

Vynikající výsledky dosažené s JALOR style vedly k vytvoření specifického produktu, který zvýší objem tak, aby zaručil standardní charakteristiku technologie JALOR. Výsledkem je zasíťování gelu se stejným obsahem kyseliny hyaluronové 23 mg/1 ml, která je aplikovaná rovněž jehlou o síle 27G k dosažení požadované úrovně vyplňování bez způsobení poškození tkáně.

JALOR intense:

- Vyplňuje linky a hluboké vrásky
- Obnovuje anebo vytváří objem
- Zvyšuje objem rtů

**Výjimečná doba vstřebání v rozmezí 8 až 18 měsíců po aplikaci.**

**Specifikace:**

Objem.....	1 ml
Koncentrace HA.....	23 mg/1 ml
Zasíťování.....	BDDE
Dynamická viskozita.....	1 mil Pa s
Stupeň zasíťování.....	★★★★
Jehly.....	2x 27G